

# HEKA<sup>+</sup> Fauteuil Patient

ADN nordique - conçu pour vous



Modèle et brevet en cours.

Le fauteuil patient HEKA<sup>+</sup> ne se contente pas d'être un meuble élégant, il incarne également le concept danois du « hygge », apportant un sentiment de sécurité, de détente et de bien-être tant pour les patients que pour les équipes soignantes.



Lorsque le patient passe de la position assise à la position couchée, le fauteuil se déplace en douceur, presque de manière flottante, grâce à un mécanisme de dossier innovant et breveté qui s'ajuste de façon dynamique. Ce mouvement fluide soutient parfaitement l'anatomie naturelle du corps, en particulier la relation entre le dos et le cou.

## Fauteuil patient HEKA<sup>+</sup>

Pour faciliter l'entrée et la sortie du patient, le repose-pieds se replie automatiquement à 90 degrés lorsque le dossier est relevé. Cette caractéristique permet également un positionnement face à face optimal entre le patient et le dentiste.



De plus, le dossier fin et étroit offre un accès maximal pour l'équipe soignante, tandis que la conception compacte et le grand décalage en hauteur garantissent des positions de travail ergonomiques, idéales pour les traitements à deux ou à quatre mains.



Le mécanisme du dossier s'adapte à chaque patient grâce à trois réglages préprogrammés, auxquels s'ajoutent des ajustements manuels pour une personnalisation encore plus poussée.



Enfin, le pédalier Ergo-Suction permet d'arrêter l'aspiration d'un simple mouvement, réduisant ainsi les gestes inutiles et la fatigue du dentiste et de son assistant.



Le mécanisme de levage du fauteuil maintient une distance constante entre la tête et les postes de travail environnants, ce qui évite de devoir réajuster l'éclairage opératoire ou le microscope.

Que le dentiste soit debout ou assis, le fauteuil HEKA+ offre une position de travail ergonomique parfaite, réduisant les tensions et améliorant l'efficacité du soin.



Le fauteuil HEKA+ peut être équipé d'un bras télescopique flexible et ambidextre, permettant de passer rapidement d'un traitement pour droitier à un traitement pour gaucher, sans nécessiter d'outils.

Cette flexibilité optimise l'utilisation des salles de soins, même lors des journées les plus chargées.

## HEKA S+



En combinaison avec nos unités de traitement, le fauteuil HEKA+ crée un environnement de travail idéal, offrant un flux de traitement simple et flexible que les patients et l'équipe apprécieront chaque jour. Lorsqu'il est connecté aux unités de traitement HEKA+, tous les réglages et positions de traitement sont automatiquement transférés au fauteuil, simplifiant ainsi l'expérience pour tous.



HEKA I+

HEKA G+

## Personnalisez votre fauteuil HEKA+



Le fauteuil HEKA+ offre une large gamme d'options de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des patients et de l'équipe soignante. De nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées pour s'adapter à vos attentes.

Vous pouvez choisir parmi de nombreuses options pour améliorer à la fois le confort et l'efficacité, garan-



tissant ainsi une parfaite adaptation à votre cabinet.

En version autonome, le fauteuil peut mémoriser jusqu'à six utilisateurs différents, chacun avec quatre positions de traitement personnalisées.

Si vous avez des besoins particuliers, nous serons heureux d'explorer de nouvelles solutions qui vous conviennent.




Position horizontale



Sellerie facilement amovible



Accoudoirs (jusqu'à deux)

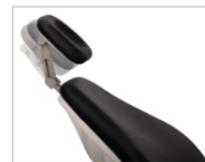

Tête à double articulation



Bras télescopique monté sur le fauteuil



Jusqu'à trois joysticks



Crochet pour pédale



Ergo aspi (Arrêt d'aspiration)



Plus de nouvelles options disponibles à partir de 2025

Le fauteuil de patient est conçu pour offrir un confort et une flexibilité idéals, grâce à des technologies et des caractéristiques ergonomiques qui bénéficient autant aux patients qu'à l'équipe de traitement.

### Caractéristiques techniques:

- : Trois moteurs électriques
- : Capacité jusqu'à 200 kg
- : Élévateurs pour position de travail debout
- : Position de Trendelenburg
- : Tête à double articulations
- : Joystick (jusqu'à trois joysticks possibles)



: Accoudoirs tournants (droit et/ou gauche)

: Bras télescopique avec aspiration monté sur le fauteuil

: Crochet pour pédale

### Options disponibles à partir de fin 2025

- : Kit mobile
- : Grande tête chirurgicale

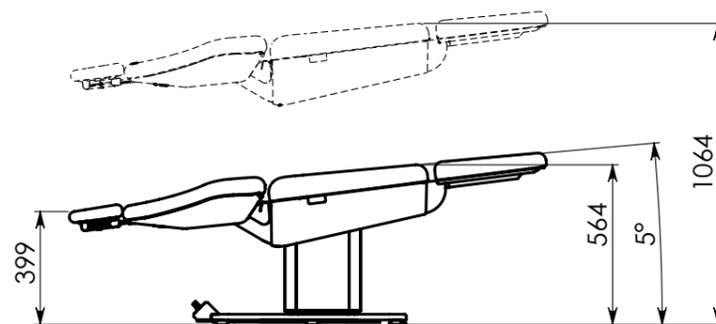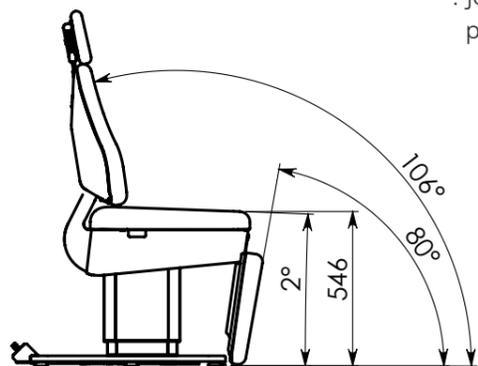

## Selleries et couleurs

Le fauteuil HEKA+ est livré avec un rembourrage Comfort, offrant un soutien optimal pour les patients. Pour un confort encore plus grand, le modèle Comfort Premium, doté de rembourrage à mémoire de forme, est également disponible. Ce modèle s'adapte parfaitement au corps du patient, apportant douceur et soutien, idéal pour les traitements longs.



Les couleurs sont régulièrement mises à jour, alors consultez notre site web pour vérifier la disponibilité des teintes souhaitées.

## Le matériau de surface est proposé en trois variantes :

### Bio Balance

Composé à 80 % de matières premières naturelles et recyclables, fabriqué à partir d'énergie 100 % neutre en CO<sub>2</sub>, réduisant ainsi l'empreinte carbone.



### Alcohol Resistant

Facile à nettoyer avec des désinfectants à base d'alcool, garantissant une hygiène optimale.



### Trend Colours

Une large gamme de couleurs est disponible pour créer une atmosphère accueillante et confortable dans vos salles de traitement.



Conçu et fabriqué dans notre propre usine au Danemark, le fauteuil de patient HEKA+ reflète notre engagement en matière d'innovation, d'artisanat et de qualité.

Jetez un coup d'œil dans les coulisses de nos installations modernes et découvrez comment nous façonnons l'avenir des unités dentaires avec des solutions adaptées à vos besoins.



HEKA  
Factory Tour

## Nous pensons aux générations à venir

Heka Dental contribue à minimiser l'impact environnemental, puisque celui-ci est réduit son impact environnemental en créant des produits durables.

Nous avons fait le choix d'utiliser l'aluminium, dont le cycle de vie est supérieur à la plupart des métaux et nous favorisons l'utilisation de l'aluminium recyclable.

Dans le nouveau fauteuil HEKA+ grâce à l'utilisation d'aluminium produit avec une consommation d'énergie réduite, ainsi que des changements dans d'autres matériaux et la construction, nous avons réussi à réduire l'impact environnemental du fauteuil de plus de 40 % par rapport aux versions précédentes.

Nous travaillons en lien constant avec nos fournisseurs et collaborateurs afin de trouver ensemble des solutions visant à réduire nos besoins énergétiques dans notre processus de production.

Cette vision globale s'applique tant dans le transport de nos produits qu'en amont lors de la conception même de ces derniers.

Modèle et brevet en cours.  
Sous réserve de modifications, d'erreurs  
d'impression et de nuances de couleurs.  
31820 - 3/2025

Heka Dental A/S  
Litauen Alle 4  
DK-2630 Taastrup  
T: +45 4332 0990  
M: info@heka-dental.dk  
heka-dental.fr



Homepage



Facebook



LinkedIn



Instagram